



## GEBRUIKSAANWIJZIJNG

### 1. Openen dispenser

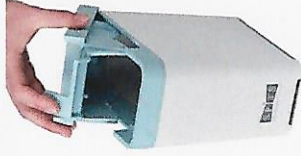

Open de dispenser eenvoudig door het openingsmechanisme iets naar achteren te duwen en gelijktijdig de deksel op te tillen.

### 2. Plaatsen MediRol

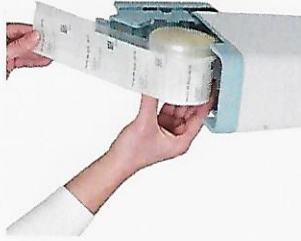

Hou met één hand het voorloopzakje van de MediRol vast met de tekst naar u toe. Plaats met uw andere hand de MediRol in de dispenser. Sluit de deksel en laat dan het voorloopzakje los.

### 3. Medicijnzakje afscheuren




Duw het openingsmechanisme tegen het medicijnzakje aan met één hand en scheur vervolgens met de andere hand voorzichtig het medicijnzakje af. Begin met scheuren bij de kant van het openingsmechanisme.

### 4. Openen medicijnzakje



Door de perforatiepin, bovenop de dispenser in het zakje te steken en het zakje rustig naar je toe te trekken, scheurt het medicijnzakje en valt de medicatie in het bakje.

### 5. Uitnemen opvangbakje

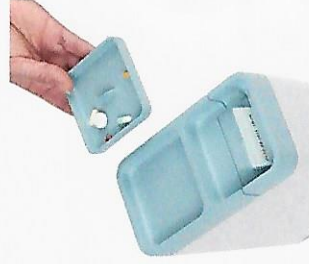

Door het opvangbakje uit te nemen kan de medicatie gemakkelijk in uw hand genomen worden om deze vervolgens in te nemen.



# De SPITS MediRol Dispenser

Eenvoudig in gebruik en aantrekkelijk design



## DE SPITS MEDIROL DISPENSER

Voor SPITS is medicatieveiligheid en therapietrouw erg belangrijk en daar helpt het gebruik van de MediRol bij. Om het gebruik van de MediRol nóg veiliger en gemakkelijker te maken heeft SPITS een nieuwe dispenser ontworpen.

De SPITS MediRol dispenser is van uitstekende kwaliteit en heeft een aantrekkelijk en modern design. Hierdoor valt de dispenser niet of nauwelijks op wanneer deze in het interieur gezet wordt.

## VOORDELEN VAN DE SPITS MEDIROL DISPENSER

- Eenvoudig in gebruik
- Aantrekkelijk design
- Gemaakt van duurzaam materiaal
- Geschikt voor zowel éénweekse als meerweekse rollen
- De MediRol is makkelijk in dispenser te plaatsen
- Het speciale openingsmechanisme voorkomt het terugvallen van de MediRol
- Medicijnzakjes zijn makkelijk te openen met behulp van een handige perforatiepin
- Medicatie wordt opgevangen in een uitneembaar opvangbakje



**Meer weten over de SPITS MediRol Dispenser?**

De dispenser is verkrijgbaar via uw apotheek.

**Meer weten over de SPITS MediRol Dispenser?**

De dispenser is verkrijgbaar via uw apotheek.